




## הוראות שימוש עדשות מגע HE חד-יומיות ACUVUE®

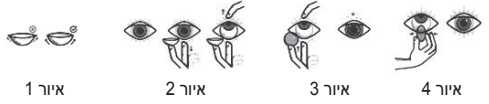

המגע או את הפרמטרים מבלי להתייעץ עם איש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים. שאל את איש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים לגבי ביקור המעקב המתוכנן עבורך.

- לפני כל שימוש בתרופה בעיניים עליך לפנות תמיד לאיש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים.
- לעולם אין להשתמש בפיצצה או בכלים אחרים להוצאת עדשות המגע ממכל העדשות.
- עישון ולא נטילת תרופות מסוימות (כגון אמצעי מניעה או תרופות אחרות) עלולים להגביר בעיות עיניים או אי-נוחות בעיניים.
- הימנע מכל אדם/עשן מזיקים או שגורמים לגירוי. יש לעצום את העיניים בעת השימוש בתרסיסים.

**הגבות שליליות:**  
צריבה, עקצוץ, גרד ו/או יובש בעיניים - אי-נוחות הקשורה לעדשות או תחושה של גוף רז בעין - נפחות או דלקת בעיניים או סביבן - אודם בעין - בעיות בעפעפעים - קניית דמועות/ואו הפרשות חריגות המעיניים - ראייה לקויה או ממשושת - עינים צבעים או הילה סביב עצמים - רגישות לאור - הפרעה זמנית יקבב חסינים היקפים, כיבים היקפיים בקרנית ושחיקה של הקרנית. אם הבחנת בבעיות כאלה, עליך להסיר מיד את עדשות המגע שלך ולפנות לאיש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים.

**הוראות שימוש:**  
אי-הקפדה על קיום הוראות השימוש עלולה לגרום לבעיות עיניים חמורות.

- יש תמיד לשתוף ידיים לפני הנגיעה בעדשות המגע שלך, משום שעדשות המגע רגישות מאוד לזיהומים.
- לעולם אין להכניס את העדשות שלך לפה או לשים רוק על העדשות שלך.
- לעולם אין לאפשר לאדם אחר להרכיב את עדשות המגע שלך.
- מלא אחר הוראות איש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים לגבי הרכבת עדשות המגע שלך והסרתן.

**אריזת העדשה:** משוך בהירות לאחר את סגירת רדיד האלומיניום על מנת להחזיק את העדשה.

**הכנסת העדשה:** וודא שהעדשה אינה הפוכה מבפנים החוצה. הנח אותה על האצבע המורה כדי לוודא את צורתה. העדשה אמורה לקבל צורה טבעית, קמורה, דמוית קערה (איור 1). כשהעדשה נמצאת על האצבע המורה, יש להחזיק את העפעף העליון תוך שימוש ביד השנייה כך שלא תמצעך. יש להניח את העדשה על העין. (איורים 2 ו-3).

**הסרת העדשה:** הבט למעלה, והחלק את העדשה אל החלק התחתון של העין תוך שימוש באצבע המורה. להסרת העדשה יש לצבט בעדינות את העדשה בין האגודל לאצבע המורה. (איור 4)

**מקרי חירום:** במקרה שחומר כימי מכל סוג שהוא (חומרי ניקוי ביתיים, מים חמים, חומרי מעבדה כימיים וכו') נפל לתוך עיניך: עליך לשתוף מיד את העיניים במי ברז ולהתקשר מיד לאיש המקצוע המטפל או לפנות מיד לחדר מיון בבית חולים.

**דיחוי על תגובות שליליות (תופעות לוואי):** על כל אירוע שאתה חווה בעת השימוש בעדשות המגע של המותג ACUVUE® יש לדווח ליצרן ו/או לנציג המורשה ו/או לרשות המתאימה במדינה.

הסמלים הבאים עשויים להופיע על התוויות או האריזות

סמל	הגדרה
	תארך ייצור
	לשימוש עד תארך (תארך תפוגה)
	אין להשתמש אם האריזה פגומה
	אין להשתמש שוב
	נא לעיין בהוראות השימוש
	זהירות
	סימון CE ומספר הזיהוי של ה-Notified Body
	קוטר
	קימור בסיס
	דיאופטר (עוצמת העדשות)
	עוצמת צילינדר
	זווית
	רמת התיקון המרבית האפשרית לתיקון ראייה לטווח קצר
	ADD "נמוך"
	ADD "בינוני"
	ADD "גבוה"

מסמך זה פונה אל נשים וגברים כאחד ומשך לטון זכר מהוה גם לטון נקבה במשמעות.

יש לקרוא בקפידה ולשמור לעיון עתיד. עדשות מגע ACUVUE® הן אביזרים רפואיים והן יותאמו תמיד על ידי איש המקצוע המטפל בתחום העיניים (אופטומטריסט או רופא עיניים). יש להנהג תמיד לפי הנחיות איש המקצוע המטפל ולקיים את ההוראות המופיעות בעלון זה.

**תיאור המוצר והשימוש המיועד:**

ישתכן שאל כל המוצרים הרשומים היזו זמנים במדינתך.

**עדשות מגע של המותג ACUVUE® OASYS עם HydraLuxe;**

**עדשות מגע של המותג ACUVUE® OASYS 1-Day עם HydraLuxe;**

**עדשות מגע ACUVUE® OASYS MAX 1-Day;**

**עדשות מגע ACUVUE® OASYS MAX 1-Day מולטיפוקל.**

**התמיסה באריזה:** בופר בוראט של תמיסת מלח (סליון) עם מתיל אתר צלולוז.

**חומר:** senofilcon A

**עדשות מגע של המותג ACUVUE® MOIST 1-DAY ACUVUE®**

**עדשות מגע של המותג ACUVUE® MOIST 1-DAY ACUVUE®**

**התמיסה באריזה:** בופר בוראט של תמיסת מלח (סליון) עם פובידון. חומר:

etafilcon A. בורטים (תומצה בורית ונתרן בוראט) מוגדרים כחומרים מטרסטים, מוטגנים ורעילים לרבייה (CMR) בקטגוריית 1B בריכז של מעל 0.1% לפי משקל (weight by weight) והם בטוחים כאשר השימוש במוצר נעשה לפי הוראות התוויה.

עדשות מגע חד-יומיות ACUVUE® מיועדות להרכבה במשך פחות מ-24 שעות בזמן ערות. על איש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים לתת לך מרשם לעדשות ולקבוע את לוח הזמנים להרכבתן. העדשות שלך אינן מצריכות ניקוי או חיטוי יש להשליך לאחר הסרתן.

עדשות מגע ספריות חד-יומיות ACUVUE® מיועדות להרכבה יומית לתיקון אופטי של מיופיה (קוצר ראייה) והיפרופיה (רוחק ראייה) אצל אנשים עם עיניים בריאות עששויה להיות להם אסטיגמציה של 1.00D או פחות.

עדשות מגע חד-יומיות ACUVUE® לאסטיגמציה מיועדות להרכבה יומית ולתיקון אופטי של מיופיה (קוצר ראייה) והיפרופיה (רוחק ראייה) אצל אנשים עם עיניים בריאות ועם אסטיגמציה.

עדשות מגע חד-יומיות ACUVUE® לטיפול בפרסביופיה (זקן ראייה) מיועדות להרכבה יומית לתיקון אופטי של מיופיה (קוצר ראייה) והיפרופיה (רוחק ראייה) אצל אנשים בעלי עיניים בריאות עם אסטיגמציה של 0.75D או פחות.

**אזהרה:** עדשות מגע הסוגות קרינה אולטרה סגולה אינן מהוות תחליף להגנה מפני קרינה אולטרה סגולה. יש להמשיך להשתמש במשקפי מגן נגד קרינה אולטרה סגולה כנדרש.

**התוויות נגד:**

כאשר מרכיבים עדשות מגע לתיקון ראייה, אין להשתמש בעדשות מגע במקרה של מחלת עיניים, פציעה, דלקת, זיהום או אי-תקנות.

כל מצב או מחלה של העין או הרקמות הסובבות אותה הנגרמים או מתמירים עקב הרכבת עדשות מגע או שימוש בתמיסתן של עדשות מגע.

אם מופיע אודם או גירוי בעיניים. חלק מהאנשים עלולים לפתח תגובה אלרגית לחומרים כימיים או לחומרים משמרים המצויים בתמיסות לטיפול בעדשות מגע.

**אזהרות:**

אי-הקפדה על אזהרות אלו יכולה להוביל לזיהום חמור, לאובדן הראייה או לעיוורון. בעיות עיניים אצל ילדים כפיכ (קרינת) עלולות להתפתח במהירות ולהוביל לאובדן ראייה. אם מופיע אחד מהסמלים הבאים (אי-נוחות בעין, אובדן ראייה, שינויים בראייה, דמעת יתר, אודם בעין) עליך להסיר מיד את עדשות המגע שלך ולפנות בדחיפות לאיש המקצוע המטפל כך בתחום העיניים.

אין להרכיב עדשות מגע אם ישנה מחלת עיניים כלשהי

אין להרכיב את עדשות המגע שלך בעת השינה

אין לחשוף עדשות מגע למים, הדבר עלול לגרום לזיהום חמור. השלך והחלף כל עדשת מגע שנחשפה למים (אין להרכיב עדשות מגע במהלך ספורט במים).

לעולם אין לשתוף את עדשות המגע שלך במי ברז.

**אמצעי זהירות:**

אין להשתמש בעדשות שלך אם אריזת הבליסטר הסטרילית פתוחה, פגומה או לאחר תארך התפוגה.

הרכב רק את עדשות המגע שרשמו עבורך בלבד. אל תשנה את סוג עדשת

## AR - הערבית - تعليمات استخدام العدسات اللاصقة ACUVUE® מלאמתה ללשתמל היומי.



יُرجى قراءة النشرة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. إن العدسات اللاصقة ACUVUE® (CL) أجهزة بصرية طبية وينبغي وضعها بواسطة أخصائي رعاية عيون (ECP) اتبع دائما ملاءمتها أخصائي رعاية العيون الخاص بك والتعليمات الواردة في هذه النشرة.

**وصف المنتج ودواعي الاستعمال:**

قد ال تتوفر جميع المنتجات المذكورة في بلدك.

**العدسات اللاصقة ACUVUE® OASYS Brand with HydraLuxe**

**العدسات اللاصقة ACUVUE® OASYS Brand for ASTIGMATISM with HydraLuxe**

**العدسات اللاصقة ACUVUE® OASYS MAX 1-Day**

**العدسات اللاصقة ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL**

محلول التعتيق: محلول بورات ملحي متعدد مع ميثيل ايثر سيليلوز. **المادة:** سينوفايكون أ.

**العدسات اللاصقة ACUVUE® MOIST 1-DAY ACUVUE®**

**العدسات اللاصقة ACUVUE® MOIST BRAND FOR ASTIGMATISM 1-DAY ACUVUE®**

**العدسات اللاصقة ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 1-DAY ACUVUE®**

محلول التعتيق: محلول بورات ملحي متعدد مع بوفيدون. **المادة:** إيتافيلكون أ

تعرف البورات (حمض البوريك وبورات الصوديوم) على أنها مواد مسرطنة ومسببة للطفرة الجينية وسامة للتكاثر (CMR) من الفئة 1B عند تركيز يزيد عن 0.1% الوزن/الوزن الجمالي، وهي أمنة عند استخدام المنتج وفقاً للتعليمات المذكورة على الملصق.

العدسات اللاصقة ACUVUE® المخصصة للاستعمال اليومي مصممة ليتم استخدامها لمدة أقل من 24 ساعة أثناء اليقظة. ينبغي أن يصف لك أخصائي رعاية العيون العدسات وأن يحدد لك جدول استخدام العدسات. ال تتطلب عدساتك تنظيفاً أو تطهيراً وينبغي التخلص منها فور نزعها.

العسات اللاصقة ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses للاستعمال اليومي مصممة للاستخدام اليومي بغرض التصحيح البصري لغرض النظر وطول النظر في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين قد يعانون من الاستجماتيزم بدرجة 1.00 ديوبتر أو أقل.

العسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM للاستعمال اليومي لمرة واحدة مصممة من أجل الاستخدام اليومي وبغرض التصحيح البصري لغرض النظر وطول النظر في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين يعانون من الاستجماتيزم.

العسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA للاستعمال اليومي لمرة واحدة مصممة من أجل الاستخدام اليومي بغرض التصحيح البصري لغرض النظر وطول النظر في الأشخاص أصحاب العيون السليمة الذين يعانون من الاستجماتيزم بدرجة 0.75 ديوبتر أو أقل.

**تحذير:** ال تحل العدسات اللاصقة الماصة للأشعة فوق البنفسجية محل الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية. وينبغي لك الاستمرار في استخدام النظارات الماصة للأشعة فوق البنفسجية وفقاً للتوجيهات.

**موانع الاستعمال:**

عند وضع العدسات اللاصقة بغرض التصحيح البصري، ال تستخدم العدسات اللاصقة في حالة مرض العين أو تعرضه للإصابة أو الالتهاب أو العدوى أو الخلل.

أى حالة أو مرض في العين أو السنج المصحوب بالتهيج أو تقلم بسبب وضع العدسات اللاصقة أو استخدام محاليل العدسات اللاصقة.

في حالة احمرار العين أو تهيجها. قد يتكون لدى بعض الأشخاص حساسية تجاه المواد الكيميائية أو المواد الحافظة الموجودة في محاليل العناية بالعدسات اللاصقة.

**تحذيرات:**

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التحذيرات إلى الإصابة بحدوى شديدة أو فقدان البصر أو العمى.

قد تتطور مشكلات العين (بما في ذلك التهابات أو التهابات) بسرعة وتؤدي إلى فقدان البصر. إذا عانيت من أي من الأعراض التالية (انزعاج في العين، فقدان البصر، تغيرات في الرؤية، زيادة في إفراز اشطراب، احمرار العين)، ينبغي لك نزع العدسات اللاصقة فوراً والتوقف باستخدامها.

را والتوقف باستخدامها فوراً إذا كنت تعاني من أي مرض بالعين.

ال تضع العدسات اللاصقة إذا كنت تعاني من أي مرض بالعين.

ال تضع عدساتك اللاصقة عند النوم.

حالات الطوارئ: إذا تعرضت عينك لرداؤد مواد كيميائية من أي نوع (منتجات منزلية، محاليل بستنة، مواد كيميائية معملية، إلخ): فاشطف عينيك على الفور بماء الصنبور واتصل فوراً بمختبره رعاية العيون الخاص بك أو قم فوراً بحففيه غرفة الطوارئ بأيمستشفى.

البالغ عن التفاعلات الضارة (الأثار الجانبية): ينبغي البالغ عن أي حدث يقع أثناء استخدام عدسات ACUVUE® BRAND CONTACT LENSES إلى الجهة المصنعة و/أو ممثلها المعتمد و/أو السلطات الوطنية لديك.

الرموز التالية يمكن أن تظهر على الملصقات أو الرزمات

الرمز	التعريف
	تاريخ التصنيع
	صالح حتى تاريخ (تاريخ انتهاء الصلاحية)
	ال تستخدمها في حالة تلف العبوة
	ال تُعد استخدامها (مخصصة لاستخدام مرة واحدة فقط)
	راجع تعليمات المستخدم
	تنبيه
	عامة CE ورقم التعريف للجهة المعتمدة
	القطر
	منحنى القاعدة
	الديوبتر (وحدة قياس قوة العدسة)
	قوة العدسة السطوانية
	المحور
	أعلى إضافة قريبة يمكن تصحيحها
	إضافة قريبة "منخفضة"
	إضافة قريبة "متوسطة"
	إضافة قريبة "مرتفعة"

هذه الوثيقة موجهة إلى النساء والرجال على حد سواء، وبالتالي فإن اللغة المنكبة هي أيضاً مؤنثة ضمناً.

• ال تعرض العدسات اللاصقة للماء، قد يؤدي هذا إلى حدوث عدوى خطيرة. وتخلص من أي عدسات الصقة قد تعرضت للماء ولم باستبدالها (ال تضع العدسات اللاصقة أثناء التثنية الرياضية المائية).

• ال تشطف عدساتك أبداً باستخدام ماء الصنبور.

الحفظيات:

ال تستخدم العدسات إذا كانت حاوية البليستر حفيه مفتوحة أو تالفة أو منتهية الصالحة. ال تستخدم ال العدسات الموصوفة لك. ال تتغير نوع عدساتك أو قياساتها دون استشارة أخصائي رعاية العيون الخاص بك. واسأل أخصائي رعاية العيون الخاص بك حول جدول مواعيد زيارات المتابعة.

• تواصل دائماً مع أخصائي رعاية العيون قبل استخدام أي أدوية في عينيك.

• ال تستخدم أبداً الملقط أو غيرها من الأدوات الخراج عدساتك من حاويتها.

• التذخين و/أو تناول بعض الأدوية (مثل وسائل منع الحمل أو غيرها من الأدوية) قد يزيد من المشكلات أو النزاج في العين.

• تجنب جميع البخرة/الدخنة الضارة أو المهيجة. اضطراب عينيك مغمضتين أثناء استخدام المنتجات الرذاذ.

التفاعلات الضارة:

الحرقان و/أو الوخز و/أو الحكّة و/أو جفاف العينين - عدم الريح عند ارتداء العدسات أو الشعور بشيء ما في عينيك - تورم أو التهاب العينين أو المنطقة المحيطة بهما - احمرار العين - مشكلات جفن العين - العين الدامعة و/أو الفرازات غير المعتادة من العين - ضعف الرؤية أو الرؤية الضبابية - رؤية أقواس قزح أو هالات حول الجسم - الحساسية للضوء - حدوث قصور مؤقت في الرؤية نتيجة الترسبات المحيطة والقرح القرنية المحيطة وتآكل القرنية. إذا حظت أي مشكلات، ينبغي أن تتزع عدساتك اللاصقة على الفور وتواصل مع أخصائي رعاية العيون الخاص بك.

إرشادات الاستخدام:

قد يؤدي عدم اتباع إرشادات المستخدم إلى حدوث مشكلات شديدة في العين.

• اغسل يديك دائماً قبل لمس عدساتك اللاصقة لأنها حساسة جداً للتلوث.

• ال تضع أبداً عدساتك في فمك أو تضع لعابك عليها.

• ال تسمح أبداً لأي شخص آخر بارتداء عدساتك.

• اتبع تعليمات أخصائي رعاية العيون الخاص بك فيما يتعلق بوضع عدساتك اللاصقة أو نزعها.

عبوة العدسة: أزل رقاقة التغليف المعدنية برفق للكشف عنالعدسة.

إدخال العدسة: تأكد من أن العدسة ليست مقلوبة. ضع العدسة على طرف إصبعك السبابة للتحقق من الشكل. ينبغي أن تتخذ العدسة شكلاً طبيعياً متحنيًا يشبه الوعاء (الشكل 1).

مع وضع العدسة على إصبعك السبابة، محذباً يدك الأخرى لرفع جفك العلوي لكي ال ترمش. ضع العدسة على العين. (الشكل 2 و 3).

نزع العدسة: انظر العلوي، وقم بزلق العدسة إلى الجزء السفلي من العين باستخدام السبابة. النظف العدسة بلفظ بين الإبهام والسبابة وأخرجه. (الشكل 4).

## EN Instructions For Use Daily Disposable ACUVUE® Contact Lenses



PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

ACUVUE® CONTACT LENSES (CL) ARE MEDICAL DEVICES AND SHOULD BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL (ECP). ALWAYS FOLLOW YOUR ECP'S DIRECTIONS AND THE INSTRUCTIONS IN THIS LEAFLET.

**PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE:** Not all of the listed products might be available in your country.

**ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLux;**

**ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLux;**

**ACUVUE® OASYS MAX 1-Day Contact Lenses;**

**ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses.**

**Packing Solution:** Borate buffered saline with methyl ether cellulose.

**Material:** senofilcon A.

**1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses;**

**1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM;**

**1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL Brand Contact Lenses.**

**Packing Solution:** Borate buffered saline with povidone. **Material:** etafilcon A. Borates (boric acid & sodium borate) are defined as CMR 1B substances in a concentration above 0.1% weight by weight and are safe when the product is used according to label instructions.

• Daily Disposable ACUVUE® contact lenses that are intended to be worn for < 24 hours while awake. Your Eye Care Professional should prescribe the lenses and determine your wearing schedule. Your lenses do not require cleaning or disinfection and should be discarded upon removal.

• Daily Disposable ACUVUE® Spherical Contact Lenses are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that may have ≤1.00D of astigmatism.

• Daily Disposable ACUVUE® Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for Daily Wear and for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that have astigmatism.

• Daily Disposable ACUVUE® Contact Lenses for PRESBYOPIA are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who have ≤ 0.75D of astigmatism.

**WARNING:** UV absorbing CL are not substitutes for UV protection. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

**CONTRAINDICATIONS:** When wearing CL for vision correction, DO NOT USE CL in case of eye disease, injury, inflammation, infection, or abnormality.

• Any condition or disease of the eye or surrounding tissues induced or aggravated by wearing CL or use of CL solutions

• If eyes become red or irritated. Some people may develop an allergic response to chemicals or preservatives in contact lens care solutions.

**WARNINGS:** Failure to adhere to these warnings can lead to severe infection, vision loss or blindness. EYE PROBLEMS (INCLUDING CORNEAL ULCERS) CAN DEVELOP RAPIDLY AND LEAD TO LOSS OF VISION. IF YOU EXPERIENCE ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS (Eye Discomfort, Loss of Vision, Vision Changes, Excessive Tearing, Eye Redness), you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL AND PROMPTLY CONTACT YOUR ECP.

• Do not wear CL if there is any eye disease

• DO NOT WEAR YOUR CL WHEN SLEEPING

• DO NOT EXPOSE CL TO WATER, THAT MAY LEAD TO SERIOUS INFECTION. Discard and replace any CL exposed to water (Do not wear CL during water sport).

• NEVER rinse your lenses in water from the tap.

**PRECAUTIONS:** DO NOT USE YOUR LENSES IF THE STERILE BLISTER PACKAGE IS OPENED, DAMAGED OR AFTER THE EXPIRY DATE.

• Only wear your own prescribed CL. Do not change your lens type

or parameters without consulting your ECP. Ask your ECP about the follow-up visit schedule.

• ALWAYS CONTACT ECP BEFORE USING ANY MEDICINE IN YOUR EYES.

• NEVER use tweezers or other tools to remove your lenses from the lens container.

• Smoking and/or taking some medicines (like contraceptives or other medicines) may increase eye problems or eye discomfort.

• AVOID all harmful or irritating vapors/fumes. Keep your eyes closed during usage of aerosol products.

**ADVERSE REACTIONS:** Burning, stinging, itchy, and/or dry eyes - Reduced lens comfort or feeling of something in your eye - Swelling or inflammation in or around the eyes - Eye redness - Eyelid problems

- Watery eyes and/or unusual eye secretions - Poor or blurred vision - Rainbows or halos around objects - Sensitivity to light - temporary impairment due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers, and corneal erosion. If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL and contact your ECP.

**DIRECTIONS FOR USE:** Not following directions for use may result in severe eye problems.

• ALWAYS WASH YOUR HANDS BEFORE TOUCHING YOUR CL as CL are very sensitive to contamination.

• NEVER PUT YOUR LENSES IN YOUR MOUTH OR PUT SALIVA ON YOUR LENSES.

• NEVER ALLOW ANYONE ELSE TO WEAR YOUR LENSES.

• Follow your ECP instructions regarding wear and removal of your CL.

**Lens Package:** Carefully peel back the foil closure to reveal the lens.

**Lens Insertion:** Ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify the shape. The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape (Fig.1). With the lens on your index finger, use your other hand to hold your upper eye lid so you will not blink. Place the lens onto the eye. (Fig 2 & 3)

**Lens Removal:** Look up, slide the lens to the lower part of the eye using the forefinger. Gently pinch the lens between the thumb and forefinger to remove the lens. (Fig.4)

**EMERGENCIES:** If chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into your eyes: FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER AND IMMEDIATELY CONTACT YOUR ECP OR VISIT A HOSPITAL EMERGENCY ROOM RIGHT AWAY.

**REPORTING OF ADVERSE REACTIONS (Side Effects):** Any incident experienced whilst wearing ACUVUE® Brand CL should be reported to the manufacturer and/or its authorized representative and/or to your national authority.

The following symbols may appear on the labels or packaging:

Symbol	Definition
	Date of Manufacture
	Use-by Date (expiration date)
	Do Not Use if Package is Damaged
	Do Not Re-Use
	Consult Instructions for Use or Consult Electronic Instructions for use. www.e-ifu-com
	Caution
	CE-mark and Identification Number of Notified Body
	Diameter
	Base Curve
	Dioptre (lens power)
	Cylinder Power
	Axis
	Highest Near Addition That Can Be Corrected
	"Low" near ADD
	"Medium" near ADD
	"High" near ADD